

# NORA

Plug&Pulse™ Technology

FOTODEPILACIÓN • FOTORREJUVENECIMIENTO • ACNÉ

Nežádanější fotodepilace



## NORA: Popis

NORA je díky nové technologii Plug & Pulse", nejnovativnější přístroj pulsního světla na trhu, který vám umožní vyměnit lampy pomocí jediného kliknutí, bez potřeby technické služby.

Vysoký výkon a životnost těchto lamp (60.000 přenosů) z něj dělají nejkonzukurenceschopnější přístroj pulsního světla na trhu.

NORA nám umožňuje 3 typy ošetření pouze jedním přístrojem:

- Fotodepilace
- Fotoomlazování
- Akné



## Plug & Pulse Technology

Technologie Plug & Pulse

Tato inovativní technologie umožňuje našim klientům náhradu nebo výměnu výbojek bez potřeby servisu, čímž se zabrání:

Nedostupnosti přístroje během výměny výbojky.  
Zbytečným výdajům za servis.

Kromě toho, tato technologie vám umožní změnit typ ošetření jediným kliknutím. Pouhou výměnou kazety, která je určena pro jednotlivé typy ošetření.



## Charakteristika NORA:

Robustní přístroje, které nepostrádají estetikou  
 Kompaktní přístroj (sloupec)  
 Celý obvod zařízení je chráněn "měkkými" částmi  
 Výkonnější estetické zařízení než předchozí  
 zachovávající si jemnost linií.

Přístroj s aplikovanou ergonomií:  
 - Dotykový displej s nastavitelnou regulací

Snadné čištění přístroje:  
 Snadnější čištění rohů  
 Odnímatelná zásuvka pro čištění  
 Hygiena  
 Ergonomie  
 Jemné nárazníky pro ochranu přístroje  
 Kompaktní sloupec

Kompaktní  
 tvar



## Charakteristika aplikátoru

Přesnější aplikátor  
Navržen pro práci s oběma  
rukama najednou  
Vertikální úchytka

Kratší aplikátor  
Menší celková vzdálenost než u  
přístroje "SELECTA"  
Snadnější přístupných ke  
komplikovaným místům  
Aplikátor s více formami uchopení  
- různé rukojeti s jedním pro jednu  
nebo dvě ruce

Aplikátor s výměnnými kazetami

Různá uchopení  
Dvojitá a vertikální rukojeť  
Vyměnitelné kazety  
Kratší aplikátor

Různé způsoby uchycení



Kratší aplikátor

# Interface

## Zapojení

Když zapnete přístroj, nejprve se ukáže obrazovka, na které se po několika sekundách zobrazí druhy ošetření v závislosti na vložené kazetě.



1. Složka "Energie"
2. Volné ošetření ochlupení
3. Přednastavené ošetření ochlupení
4. Tlačítko menu
5. Tlačítko pomoc
6. Tlačítko uložení ošetření
7. Tlačítko výměna kazety
8. Zobrazení nastavení pulzu
9. Tlačítko reset částečné přenosy
10. Informační tabule počet přenosů  
Informační tabule typ kazety a stav
11. lampy
12. Tlačítko STOP
13. Tlačítko Start

# NORA: Popis

Přednastavené programy pro ošetření:

Fotodepilace

Fotoomlazení a akné

**volitelné**



# OŠETŘENÍ





## Aplikace- Fotodepilace

Depilace na základě pulsního světla se stala třetím nejpopulárnějším kosmetickým ošetřením na světě.

Více než 80% mužů a žen na světě ve věku mezi 16 a 70 lety se depiluje.



Fotodepilace (610 nm).

světlo je pohlcováno chloupkem.

Chloupek je rovnoměrně zahříván

Teplo, které proudí chloupkem zničí folikul. Část, která je v kontaktu s papilou je zničena přenosem tepla. Chloupek nakonec upadne a folikul již není schopen produkovat ochlupení.

## Aplikace - Fotoomlazení

Ženy mezi 30 a 65 jsou hlavní skupinou pro tento typ ošetření. 20% ošetření fotodepilací probíhá u mužů.

Hlavními oblastmi ošetření je obličej, ruce a hrudník.

**Stařecké skvrny a pigmentace** způsobená slunečním zářením (530 nm).

Melanin absorbuje snadno světlo, což způsobuje oteplování skvrny.

Teplo způsobuje zničení buněk tkáně uvnitř pigmentace.

Tělo rozpozná částice jako odpad a eliminuje je.

Částice, které zůstanou na povrchu se přirozeně oloupou.

**Vrásky a výrazové linie** (530 nm).

Světlo stimuluje fibroblasty k produkci kolagenu.

Nový kolagen je v kůži syntetizován a zdvihá dno vrásky.

Kolagen je rovnoměrně rozložen na povrchu,

zlepšuje strukturu a zmenšuje póry.



## Aplikace Akné

**volitelné**

Aplikace - Akné

Akné je nejčastější onemocnění kůže, které postihuje nebo v určité fázi svého života postihlo více než 80% populace.

Obvykle se vyskytuje na obličeji, krku, zádech, hrudníku a ramenech.

Vyskytuje se především v období dospívání.

Akné (410 - 610 nm).

Unikátní filtr určený pro tuto léčbu

(410 - 610 nm.) vytváří paprsek světla, který vyvolává dva procesy:

Vznik jedné molekulární varianty kyslíku, potlačující bakterii P. Acnes

Protizánětlivé a regenerační účinky (kolagen)

Pór je zbaven mrtvých buněk a otok postupně

Mizí. Pór je odblokován a kůže je díky vytvořenému kolagenu mnohem hladší.




# FUNGOVÁNÍ



## Výměna aplikační kazety

Výměna kazety

Pomocí nástroje na výměnu kazety, stiskněte otvor 1 a pak 2, následně uslyšíte příslušný zvuk otevření kazety.

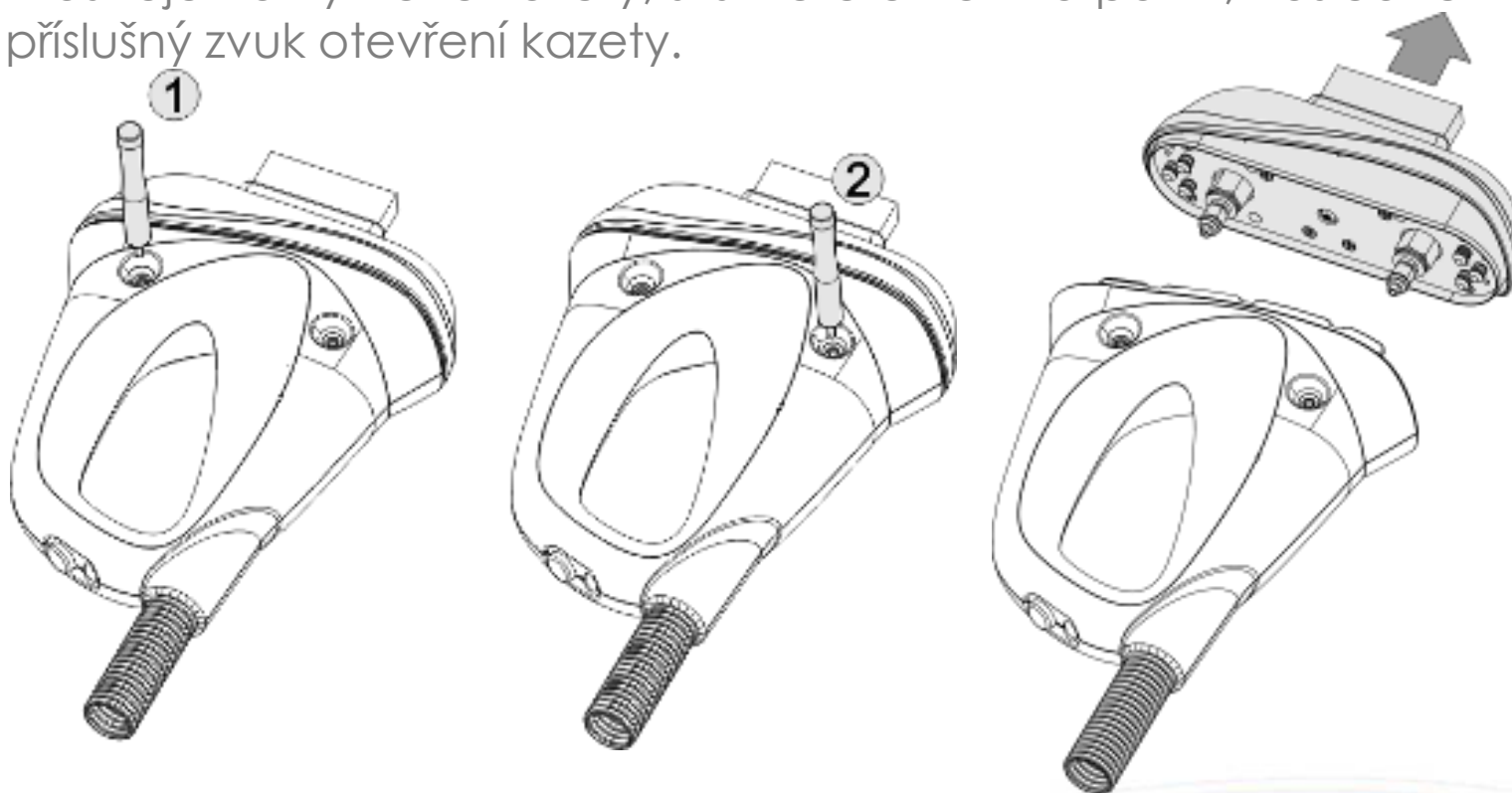

NORA:



**NORA** (Ref. 1722)




Gafas operador  
Ref. 11.020 - 1 ud.



Gafas usuario opacas  
Ref. 61.457 - 1 ud.



Gafas usuario  
Ref. 11.019 - 1 ud.

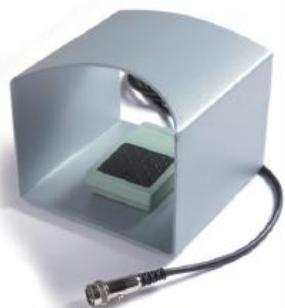

Pedal disparo  
Ref. 279.511 - 1 ud.



Embudo de llenado  
Ref. 279.531 - 1 ud.



Gel fotodepilación  
Ref. 11.109 - 1 l.



Cartucho fotodepilación  
Ref. 11.111 - 1 ud.



Cartucho fotorrejuvenecimiento  
Ref. 11.125 - 1 ud.



Herramienta cambio cartucho  
Ref. 279.517 - 1 ud.

## Základní vybavení

## Volitelné vybavení



Cartucho acné  
Ref. 11.126 - 1 ud.

# KLINICKÁ STUDIE







Muž 34 roků  
1 sezení  
22 J / cm<sup>2</sup>  
10 (10) 10 ms  
1 sezení po 3 týdnech  
Tmavé a tenké ochlupení,  
Fototyp III



Muž 57 roků

1 sezení

32 J / cm<sup>2</sup> (530 nm filtrem.)

12 (5) 12 ms. (dvojitý přenos)

Odstranění hyperpigmentace. Snímek byl pořízen 2 týdny po sezení.



Žena 28 roků  
12 sezení (1-2 týdně)  
12-14 J / cm<sup>2</sup> (Filtr 410 + BlueCare)  
5 (7) 5 (7) 5 ms

## ZÁVĚR

Předběžné výsledky studie vedou k závěru, že přístroj NORA je vysoce účinný při:

Fotodepilaci

Antiaging

Akné

Jednotlivé parametry každého pulsu umožňují nižší energii ošetření, aniž by se tím snížila jeho účinnost.

Snížení energie ošetření způsobuje, že jsou sezení s přístrojem NORA bezpečnější a představují nižší riziko nežádoucích účinků.

Parametrizace umožňuje bezpečně zacházet s typem pleti V.

## Reklamní podpora

- KATALOG
- LETÁČEK PRO VEŘEJNOST
- ROLL-UP
- HANDBOOK
- MATERIÁL PRO VLASTNÍ REKLAMU



# Prodejní argumenty





Exkluzivní technologie Plug & Pulse™:

Výměna lampy bez potřeby servisu.  
Změna typu ošetření pouhým jedním klikem.  
Automatická detekce ošetření.



Větší trvanlivost a účinnost lamp:

60.000 zaručených impulsů.  
Stabilní světelná energie po celou dobu životnosti lampy.

Vysoký výkon:  
nejlepší cena za přenos  
(méně než 1 cent €).



# NORA: Prodejní argumenty



3 druhy ošetření v jednom přístroji:  
 Fotodepilace  
 Fotoomlazování  
 Akné (nepovinné)



Technologie variabilního pulsu:  
 Pro možnost ošetření široké škály typů pleti  
 (od I až V).  
 Všechny typy ochlupení (tloušťka, barva a  
 hloubka folikulu).

Uživatelská úroveň:

dotykový displej 10,4 (s širokým  
 pozorovacím úhlem).  
 Předem nastavitelné programy.  
 Možnost uložit 100 programů.

Kompaktní a všestranný vzhled

